

監測電鍍槽的有效工具

QUALILAB[®] QL-5EX

Plating Bath Analysis with CVS Accuracy



QUALILAB QL-5EX 是新一代的 CVS(循環電位剝離法)測試系統。它可把電鍍液中的有機成份進行量化分析。

QL-5EX 也可以用來化驗無機成份。整個分析過程透過全電腦控制來指示用家以不同的操作程序來進行自動化分析，它可計算及報告電鍍槽液內的添加劑及其成分的濃度。ECI 公司透過十多年積累得來的電化學分析經驗設計出自動化及人性化的操作程式來提高分析的準確性，縮短分析時間，並且不斷擴展設備在新領域上的應用。

Programmable System for Analysis of Organics and Inorganics



QUALILAB QL-5EX

使用方便, 可靠, 準確及耐用

特徵與好處

QL-5EX 的特徵：

- 人性化的操作介面 - 具協助用家解決問題的輔助菜單
- 電鍍液中有機和無機組份的分析方法已經編寫在程式中
- 具彩色屏幕電腦及打印機
- 可以電壓圖表(指紋)監察電鍍槽內不斷增加的污染物或做碳處理時污染情況的改善
- 可更換測試頭來避免交叉污染及增加分析速度
- 自動注射器協助操作人員改善工作效率及準確度, 使操作人員可以在分析進行時做其他工作
- 具擴充性的應用軟件, 包括 SPC 功能
- 密碼保護重要操作版面

典型的運用



優化電鍍工序

QL-5EX 可提供準確可靠的方法來監測有機添加劑, 無機組份和污染物。

此外, QL-5EX 能提供卓越的:

- 添加劑的入貨及出貨檢查
- 優化及監測碳處理過程
- 分析研究各種組分的消耗率
- 優化新的電鍍工藝及協助發展新的配方

但是最重要的是 QL-5EX 為用戶提供快速的分析、準確的結果為你的工藝護航。

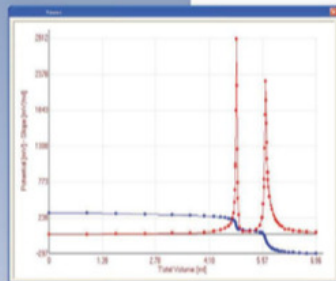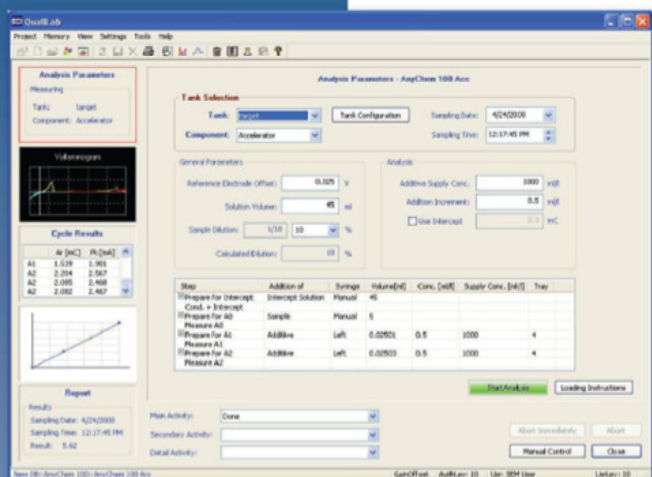

Worldwide Distribution & Support Available



锦贤科技
GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市锦贤科技有限公司

SHENZHEN GENESEA TECHNOLOGY CO., LTD.

电话: 0755-36838322 传真: 0755-28226934

网站: www.gene-sea.com

邮箱: genesea@126.com

QQ: 510244122 32174454